


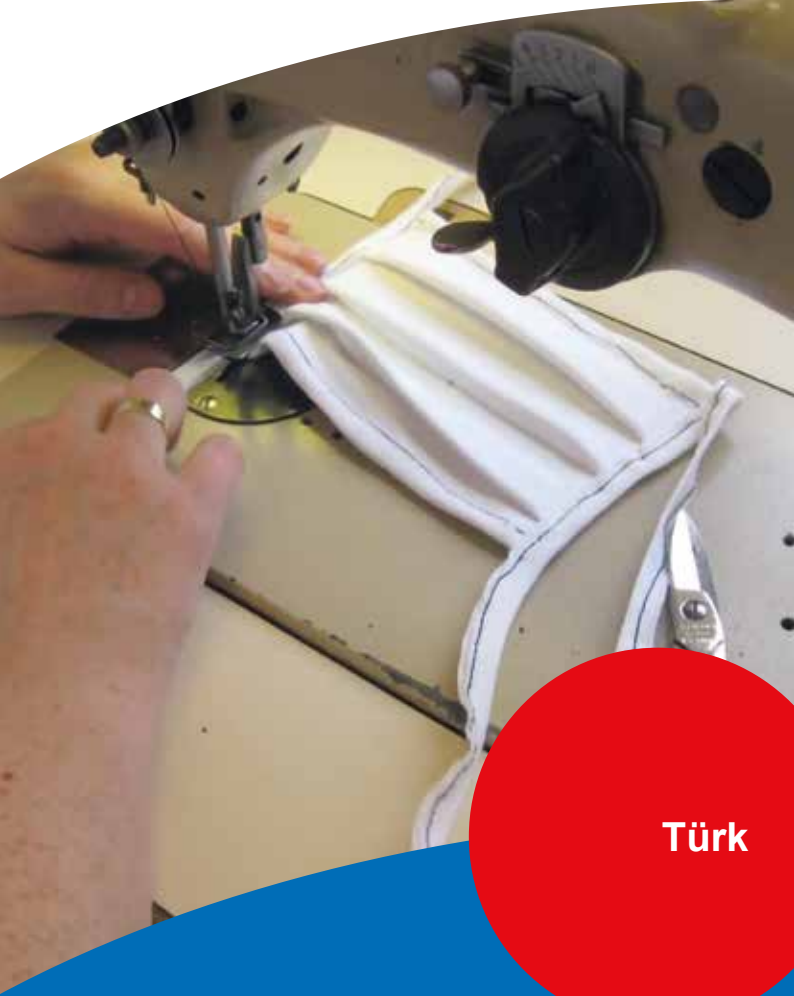

Türk

**Geçici Ağız Burun Koruma
Maskesi İçin Dikiş Kılavuzu**


Sırasıyla gerekli olan malzemeler:

- İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
- İki adet 17 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
- 15 cm uzunluğunda ince ve bükülebilir bir tel (örneğin Zanaat Teli, Pipo temizleyicisi- Şönil, Poşet ağız bağlama teli)
- 17 cm x 34 cm büyüklüğünde, hava (nefes) geçirgen, kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaştan yapılmış bez (örneğin Bez olanından çocukbezi, Tişört kumaşı, Hafif pamuklu bez)

Hava (nefes) geçirgenlik testi:

- İki kat bez alın
- Ağız ve burun çevresinden sıkıca kapatın
- Nefes alın ve nefes verin

Nefes alıp vermede büyük bir zorlukla karşılaşmıyorsanız, o malzeme kullanım için uygundur.

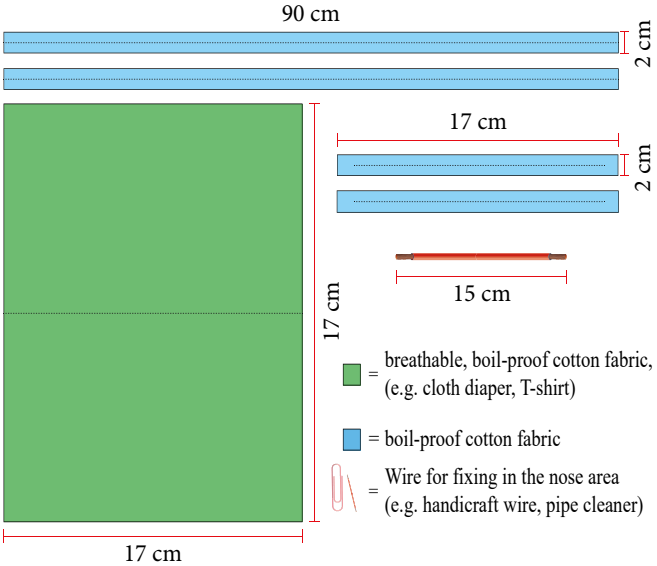

İşte böyle yapıyorsun:

1. Bezi 17x34 cm olarak işaretleyin ve kesin.



2. Bezi ikiye katlayın ve ütöleyin.



3. Bezi üç eşit parçaya kıvrım yapın ve ütöleyin (kıvrım derinliği 1,3 cm).



4. İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde (baş bantları) ve iki adet 17 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde (kenar takviyesi) pamuklu kumaştan kesin. Kesim iplerini temizleyin.




Ya da hazır Vücutbandları kullanın.



5. Dört şeridin hepsini ikiye katlayın ve ütöleyin.



6. Beze kenar takviyelerini üstten ve alttan yerleştirin.

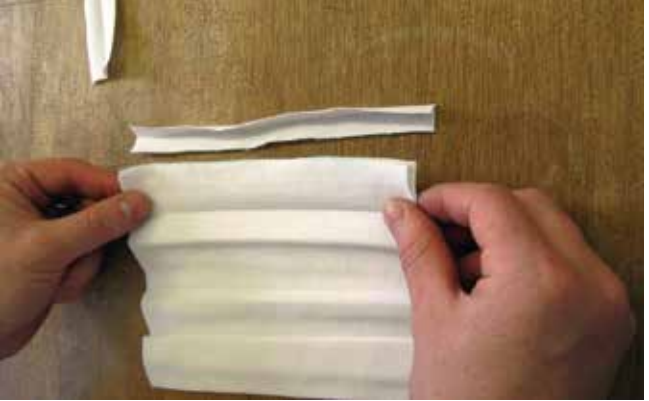

7. Teli üst kenar takviyesinin içine yerleştirin




8. Bezi kenarlardan tutturun.



9. Kenar takviyelerini sabitleyin ve diki.



10. Kumaşın ütülenmiş kıvrımlarını birlikte katlayın ve her iki taraftaki kafa bantlarının ortasına yerleştirin.

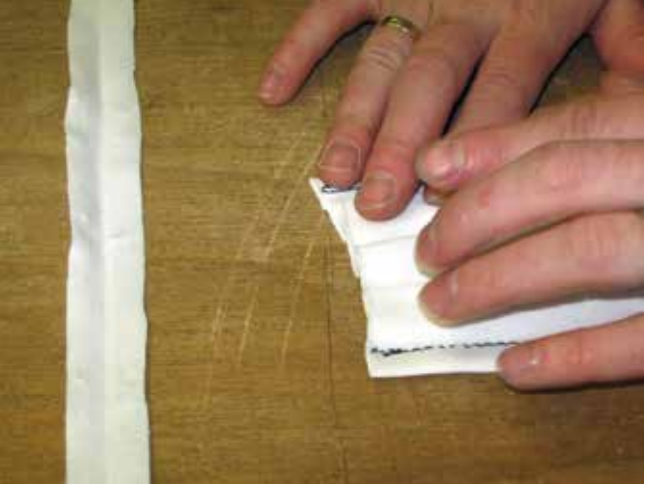

11. Baş bantlarını sabitleyin ve diki.



Yıkaneabilir BMNS'in bakımı ve temizliđi

Yıkaneabilir BMNS daima kuru depolanmalıdır. İlk kullanımdan önce BMNS yıkanmalıdır. Kullanımdan sonra, BMNS dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır ve mümkün olduđuunca dış yüzeye dokunmaktan kaçınılmalıdır. Çıkarıldıktan sonra el yıkama yapılmalıdır.

Kullanılmış BMNS her kullanımdan sonra veya günde en az bir kez temizlenmelidir.

Çamaşır makinesinde 90°C'de yıkanabilir veya bir su banyosunda (5 dakika) ocakta kaynatılabilirler. BMNS daha sonra kurutulmalıdır.

Yükümlölük (Sorumluluk)

Açıkça belirtilir ki, Troisdorf Şehri Belediyesi geçici ağız burun koruma maskesinin koruyuculuđu, üretimi veya uygun kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı veya diđer ilgili kişiler tarafından oluşan hayati, bedensel ya da sađlıksal zararlarda Troisdorf Şehri Belediyesinden herhangi bir şekilde tazminat talep edilemez.

Geçici ağız burun koruma maskesinin üretimi / kullanımı sadece kendi sorumluluđunuzdadır.

Robert Koch Enstitüsü'nde belirtilen hijyen düzenlemelerine, her durumda uyulması gerekmektedir.

© Stadt Essen – Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde
Bilder: © Moritz Leick, Stadt Essen



STADT
TROISDORF

Pressestelle

Kölner Straße 176

53840 Troisdorf

Telefon (02241) 900-0

Telefax (02241) 900-800

E-Mail Rathaus@troisdorf.de

Internet www.troisdorf.de



www.facebook.com/StadtTroisdorf